

Agitador Compacto

MK161

Movimiento de agitación rotativo, elíptico y recíproco

- Compacto, diseñado para ahorrar espacio
- Movimiento giratorio, elíptico y recíproco variable para mezclar, extraer y agitar las muestras
- Potencia y velocidad de agitación estables y altas con el motor DC sin escobillas
- Frecuencia de agitación y temporizador se ajustan con el dial y la pantalla digital
- Función de pausado de agitación, función de temporizador y operación constante con un solo interruptor
- Patrones de mezcla, extracción y agitación seleccionables cuando se utilizan en diferentes etapas de agitación y soportes (elemento opcional)
- Puede ser colocado dentro de la incubadora IN-602CSW para agitación de incubación

Especificaciones

Modelo	MK161
Modo de agitación	Rotatorio, elíptico y recíproco (operación manual)
Rango de agitación	Rotatorio: 30mm Recíproco: 30mm
Frecuencia de agitación	20~200rpm
Controlador de frecuencia	Dial de ajuste, pantalla digital
Temporizador	Dial de ajuste, pantalla digital/Digital 0.1min. (6sec.) a 99.9h.
Dimensiones etapa de agitación	Unidad principal : W300 x D254mm, Etapa : W290 x D250mm
Dimensiones externas	W350 x D300 x H150mm
Peso	~15kg
Fuente de alimentación	AC115V 0.5A / AC240V 0.3A



Ejemplo de uso de la base para montaje y soportes para matraces erlenmeyer (opcional)



Ejemplo de instalación de MK161 dentro de la incubadora IN602CW con base de agitación deslizante (opcional)

*Cristalería no incluida


Accesorios operacionales

Base para montaje de abrazaderas



Capacidad	Núm pinzas para erlenmeyer
100ml	10 unidades
200ml	9 unidades
300ml	5 unidades
500ml	4 unidades
1,000ml	2 unidades
Cód. producto	232061

Pinza de sujeción Erlenmeyer

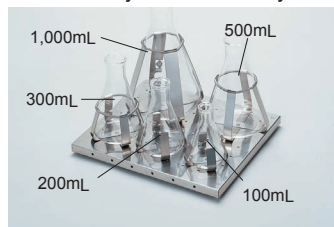

Cód. producto	Capacidad	Núm. de pinzas
232062	100ml	10 unidades
232063	200ml	9 unidades
232064	300ml	5 unidades
232065	500ml	4 unidades
232066	1,000ml	2 unidades

*La base de montaje se vende por separado

Soporte diagonal



Soporte diagonal para matraces erlenmeyer		
Cód. producto	Capacidad	Núm. unidades
232067	100ml	3 unidades
232068	200ml	2 unidades
232069	300ml	2 unidades

*La base de montaje se vende por separado

Soporte diagonal para tubos de ensayo		
Cód. producto	Diámetro	Núm. unidades
232080	Ø12mm	50 unidades
232081	Ø16.5	20 unidades
232082	Ø18	20 unidades

*La base de montaje se vende por separado

Soporte de agitación para tubos centrífugos



Para tubos spitz

Cód. producto	Tamaño	Núm. unidades
232070	15ml	12 unidades

Para tubos centrífugos de 50ml

Cód. producto	Diámetro
232083	Ø29mm

*La base de montaje se vende por separado


Lámina antideslizante



Cód. producto	Dimension (W x D x H)
232084	290 x 250 x 30

*La base de montaje se vende por separado


Soporte de agitación rejilla flexible

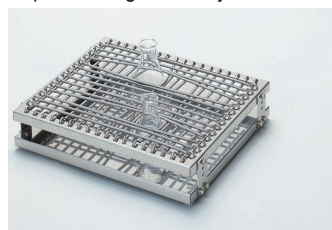

Dimension (W x D x H)	
290 x 250 x 66mm	
Número de tubos de ensayo: Tubos de ensayo de Ø16mm x 64 (inclinación 45°)	
Número de matraces erlenmeyer: 50mlx20uni., 100mlx10uni., 200mlx9uni., 300mlx5uni., 500mlx4uni. 1000mlx2uni.	
Cód. producto	232050

*No es necesario usar la base de montaje. Puede colocarse directamente en la unidad principal

Soporte rejilla flexible de dos estaciones

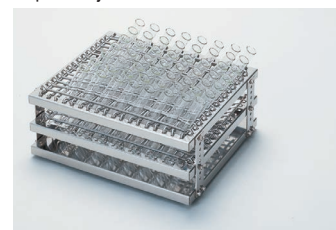

Dimension (W x D x H)	
290 x 250 x 110mm	
Número de tubos de ensayo: Tubos de ensayo de Ø16mm x 64 (inclinación 45°)	
Número de matraces erlenmeyer: 50mlx20uni., 100mlx10uni., 200mlx9uni., 300mlx5uni., 500mlx4uni. 1000mlx2uni.	
Cód. producto	232056

*No es necesario usar la base de montaje. Puede colocarse directamente en la unidad principal

*Cristalería no incluida