

Agitador de Laboratorio

Vertical / Horizontal / Rotatorio / Agitación Vertical de Doble Cara

SA300/320/400

SA300/400

20~300rpm

SA320

20~210rpm

Amplitud de
agitación

40mm



SA320 con soporte para tubo de ensayo

SA300 con embudo de separación

No incluye cristalería



SA320 con soporte para embudo de separación

SA400 con soporte para embudo de separación

No incluye cristalería

El SA300 logra agitar en dos dimensiones (horizontal y vertical), mientras que el SA320 permite una agitación rotatoria y el SA400 una agitación vertical de doble cara. Todos los modelos son eficientes en la extracción, el cultivo y la agitación de la mezcla de muestras.

- Pueden obtenerse vueltas estables de baja a alta velocidad
- Compacto y equipado con una potente carga de agitación
- Configuración con dial de fácil uso para ajustar la frecuencia de los temblores y pantallas digitales
- Posibilidad de cambiar entre el funcionamiento con temporizador y el funcionamiento continuo
- Varios soportes pueden ser fácilmente unidos y retirados y son extremadamente duraderos

SA300/320

- La unidad principal agita verticalmente, pero se puede colocar de lado para agitar horizontalmente

SA400

- Un soporte de muestras de 6 piezas de 1 litro líquido y un soporte de muestras de 4 piezas de 2 litros líquidos pueden agitarse simultáneamente.
- Posibilidad de agitación de doble cara.

Especificaciones

Modelo	SA300	SA320	SA400
Método de agitación	Agitación Horizontal / Vertical	Agitación Horizontal / Vertical rotatorio	Agitación vertical de doble cara
Número máx. de porta muestras	100ml x 5, 200ml x 4, 300ml x 4, 500ml x 4, 1000ml x 3, 2000ml x 2		100ml x 10, 300ml x 8, 1000ml x 6, 200ml x 8, 500ml x 8, 2000ml x 4
Velocidad de agitación: horizontal	20~300 rpm	20~210 rpm	-
Velocidad de agitación: vertical	20~300 rpm	20~210 rpm	20~300 rpm
Visualización de los ajustes de velocidad	Dial de ajuste		Dial de ajuste / pantalla digital
Temporizador	Dial de ajuste 0~60 min. (escala mínima 5 min.). Función de conmutación continua		
Motor	Motor DC 90W		
Dimensiones externas	W460 x D460 x H423 mm		W520 x D460 x H483 mm
Peso	~40kg		~39kg
Fuente de alimentación	115/220V, monofase, 2A / 1A		
Accesorios incluidos	1 Fusible, 1 cepillo de carbón		

Agitación Horizontal



Agitación Rotatoria + Horizontal



Agitación Vertical



Agitación Rotatoria + Vertical



■ Accesorios operacionales

■ Soporte de tubo centrifugo



Para todos los modelos
Agitación horizontal / vertical

Dia. 16~35mm
Largo 110~130mm
18 unidades

Cód. producto 232087

■ Soporte de tubo de ensayo



Para SA300/320
Agitación horizontal

Dia. 16.5~18mm
Largo 160~190mm
18 unidades

Cód. producto 232086

■ Soporte para embudo de separación



Para todos los modelos
Agitación vertical

50ml
100~1000ml
2000ml

Cód. producto 232089

■ Soporte del embudo de separación



Para todos los modelos
Agitación vertical

100~1000ml

Cód. producto 232096

■ Base para montaje de abrazaderas



Para SA300/320
Agitación horizontal

Capacidad	Unidades
100ml	28
200ml	19
500ml	14
1L	9
Cód. producto	232095

■ Pinza de sujeción Erlenmeyer



Para SA300/320
Agitación horizontal

Cód. producto	Capacidad	Unidades
232062	100ml	10
232063	200ml	9
232064	300ml	5
232065	500ml	4
232066	1L	2


■ Estante diagonal



Para SA300/320
Agitación horizontal

Soporte diagonal para matraz erlenmeyer		
Cód. producto	Capacidad	
232067	100ml	
232068	200ml	
232069	300ml	
Soporte diagonal para tubo de ensayo		
Cód. producto	Tamaño	Unidades
232080	ø12mm	50
232081	ø16.5mm	20
232082	ø18mm	20

■ Lámina antideslizante

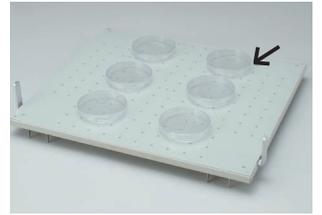

Para SA300/320
Agitación horizontal

Grosor: 1mm
W450 x D396mm

Cód. producto 232071

*La base de montaje se vende por separado

■ Soporte para tubo de ensayo



Para SA300/320
Agitación horizontal / vertical

Gradilla para tubos de ensayo
W238 x D121 x H105mm
2 líneas

Cód. producto 232088

■ Soporte para matraz Erlenmeyer



Para SA300/320
Agitación horizontal

Ajustable 100~1000ml

Cód. producto 232097

■ Rejilla flexible de dos estaciones



Para SA300/320
Agitación horizontal

320 tubos de ensayo de ø16
(diámetro 20mm)

Cód. producto 232079

*La base de montaje se vende por separado