

Lavadora Semiautomática de Cristalería

AW47

Capacidad Tubos de ensayo: 450u. (16.5ml)
Matraz alforado: 36u. (100ml)

Temp. del agua de lavado Temp. ambiente ~60°C

Tiempo de lavado Rango de ajuste 0~60 min.



Compacta y potente lavadora semiautomática de cristalería fácil de usar

- Lavadora semiautomática, fácil de operar fijando sólo el tiempo e inicio
- El método de chorro de agua presurizado de dos vías hacia arriba y hacia abajo con boquillas de chorro rotatorias logra una limpieza de alto nivel. El lavado con detergente también está disponible
- Tiene un calentador de agua incorporado, no requiere de tubería de caldera ni sistema de calefacción de agua
- Una rejilla opcional está disponible para los elementos difíciles de limpiar, tales como cristalería de cuello o cuerpo estrecho

Panel de control




Especificaciones

Modelo	AW47
Método de limpieza	Método de chorro de agua presurizado de dos vías hacia arriba y hacia abajo Boquillas de chorro giratorias (fijas cuando se utiliza la rejilla)
Temp. de agua de lavado	Temp. ambiente ~ 60°C
Calentador de agua	Calefactor incorporado 1kW, temperatura ambiente a 60°C
Presión de suministro de agua	0.1~0.3MPa
Soporte de cristalería	Mesa (estándar), rejillas (opcional)
Suministro de agua	Válvula electromagnética abierta / cerrada
Drenaje de agua	Drenaje natural por diferencia de nivel de agua
Material exterior	Placa de acero galvanizado libre de cromo, pintura resistente a los productos químicos
Material interior	Acero inoxidable
Dimensiones externas	W450 x D490 x H875mm
Dimensiones internas	W420 x D450 x H570mm
Bomba	200W
Mesa giratoria	Dia. 420mm
Puerto	Estilo desplegable
Peso	~43kg
Fuente de alimentación (50/60Hz)	AC115V 13A / 220V 7A
Accesorios incluidos	1 Manguera de suministro de agua (con acoplador) 2m 1 Manguera de drenaje (I.D.25.4mm) 1.5m 1 Cubierta de vinilo 1kg de detergente libre de fósforo (1 cuchara medidora de 50ml.) Unidad de suministro de agua
Consumible	Detergente libre de fósforo

* Protuberancias no incluidas

Dimensiones (mm)

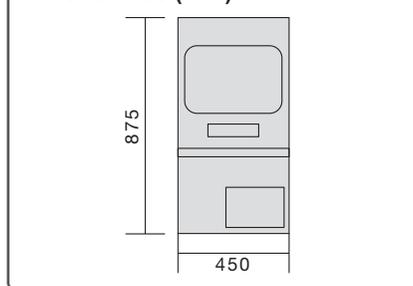

Accesorios opcionales



(1)
Rejilla (cristalería no incluida)



(2)
Rejilla para tubos de ensayo (cristalería no incluida)



(3)
Detergente libre de fósforo

No.	Producto	Descripción	Cód. producto
(1)	Rejilla	Sostiene hasta 36 frascos de 100 ml	291090
(2)	Rejilla tubos de ensayo	Sostiene hasta 450 tubos de ensayo de ø18,5 mm	291091
(3)	Detergente	8kg Detergente libre de fósforo	8190026001